

CACHET DE LA CLINIQUE

Dr :
Code client :

PATIENT / PROPRIÉTAIRE

Nom - Prénom propriétaire :
 Nom patient :
 Espèce : CHIEN CHAT CHEVAL Autre :
 Race :
 Sexe : F M Stérilisé : OUI NON
 Date de naissance / Âge :
 [Facultatif] N° de tatouage / Puce :

PRÉLÈVEMENTS

Date et heure :
 Nombre d'échantillons :
 Tubes : 0 1 2 3
 Lames :
 Autres :

TRANSPORT :

- Dépôt laboratoire Inovie
- Ramassage par coursier
- Chronopost (+9 euros)
- Lettre suivie pré-affranchie (+4 euros)

RÈGLEMENT :

MONTANT TOTAL (analyses + envoi) :
 Facturation à la clinique Paiement en ligne Règlement joint

Aucun résultat ne sera rendu en l'absence de règlement (sauf si facturation à la clinique).

**RENSEIGNEMENTS REQUIS
POUR L'INTERPRÉTATION**



Commémoratifs / signes cliniques :

 Localisation / Aspect macroscopique / Imagerie :

 Durée d'évolution :
 Traitements reçus :
 Suspicion clinique :

CYTOLOGIE

- NFS + Réticulocytes + Frottis sanguin (joindre tube EDTA)
- Frottis sanguin (joindre impérativement les résultats de la NFS)
- Myélogramme (joindre impérativement un frottis sanguin + les résultats de la NFS +/- tube EDTA)
- Masse cutanée – sous-cutanée
- Nœud(s) lymphatique(s)
- Organes : Foie / Rate / Rein / Prostate / Poumon / Pancréas / Autre
- Frottis Vaginal / Conjunctival / Nasal / Rectal
- Cytologie de liquides :
 - Épanchement abdominal, pleural, péricardique (tube EDTA + frottis direct et du culot)
 - Liquide articulaire (tube EDTA + frottis direct)
 - Liquide de lavage bronchoalvéolaire (tube EDTA + frottis direct et du culot)
 - Urines (tube EDTA + frottis du culot)
- Bilan d'extension mastocytome / lymphome (NL, Foie, Rate, Moelle osseuse, Frottis sanguin)
- LCS / humeur aqueuse :
 - Cytologie seule (envoyer une lame cytospin par cytocentrifugation non colorée)
 - Cytocentrifugation + Protéines + Cytologie (tube EDTA + tube Sec)
 ⚠ nous contacter en amont pour la logistique (cytocentrifugation à réaliser dans les 3h)
- Relecture d'un prélèvement initialement non conclusif
- Bilan cytologie + bactériologie

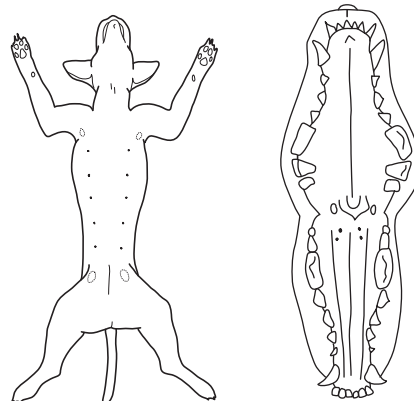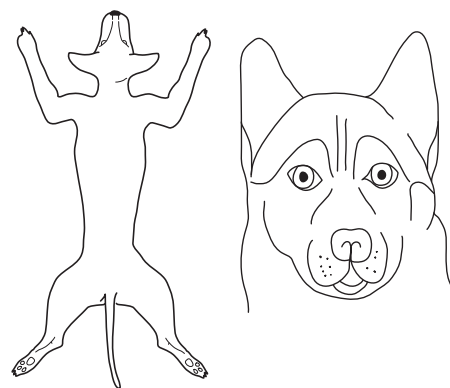

1 PRÉLÈVEMENTS DE LÉSIONS SOLIDES (MASSES, NŒUDS LYMPHATIQUES, ORGANES...)

- L'utilisation d'aiguilles 25G (orange) ou 23G (bleue) est recommandée pour les ponctions de masses, 22G (noire) pour les ponctions d'organes et idéalement 25G pour les nœuds lymphatiques.
- L'utilisation d'une cytobrosse sera privilégiée pour les lésions ulcérées (truffe de chat par exemple), les frottis de muqueuses (conjonctivale, vaginale, rectale, nasale).
- Pour les frottis conjonctivaux, un rinçage oculaire préalable est conseillé pour éviter l'agglomération des cellules dans le mucus (difficulté de lecture et d'interprétation).
- Les lames utilisées doivent être propres avec de préférence un bord dépoli, pour faciliter l'identification au crayon à papier de chaque lame avec le nom de l'animal/propriétaire et le site cytoponctionné.
- Une fois étalées, les lames non colorées et non fixées peuvent être conservées plusieurs semaines, à condition de les garder à l'abri de la lumière, de la poussière et des vapeurs de formol.

2 PRÉLÈVEMENTS DES LIQUIDES : SUR TUBE EDTA (PAS DE SERINGUE !)

La conservation des liquides est courte. L'envoi simultané d'un tube EDTA et de lames préparées lors du recueil du liquide, avec un envoi rapide (Chronopost ou coursier), reste la meilleure alternative pour garantir un résultat cytologique.

- Les étalements sur lame sont envoyés non fixés, non colorés, et identifiés au crayon à papier.
- Éloigner les lames de toute exposition à des vapeurs de formol
- Fournir une feuille de commémoratifs

LIQUIDES	MILIEU DE PRÉLÈVEMENT	CONSERVATION	ENVOI AU LABORATOIRE	+ feuille de commémoratifs
Épanchement	Tube EDTA	Très variable ▲ +20°C ≤ 24h ▲ +4°C ≤ 36 / 48h	<ul style="list-style-type: none"> • Tube • + 1 étalement direct • + 1 étalement du culot (pas nécessaire si liquide très hémorragique ou très purulent) 	
LBA	Tube EDTA	▲ +20°C ≤ 24h ▲ +4°C ≤ 36 / 48h	<ul style="list-style-type: none"> • Tube • + 1 étalement direct • + 1 étalement du culot 	
Liquide articulaire	Tube EDTA	▲ +20°C ≤ 24h ▲ +4°C ≤ 36 / 48h	<ul style="list-style-type: none"> • Tube • + 1 étalement direct 	
LCS / Humeur aqueuse	Tube EDTA	▲ +20°C < 1h ▲ +4°C ≤ 2h	<ul style="list-style-type: none"> • Tube + culot de cyto centrifugation spécifique (non réalisable en clinique à demander à un laboratoire d'analyses de proximité). Nous contacter au préalable. 	
Urines	Tube EDTA	▲ +20°C ≤ 2h ▲ +4°C ≤ 24h	<ul style="list-style-type: none"> • Tube (▲ +4°C) • + 1 étalement direct • + 1 étalement du culot 	